


Mi Electric Toothbrush
Manual de Usuario



PRECAUCIONES

⚠ Nota

Puede que experimente picor o un ligero sangrado tras el primer uso. Esto se debe a que las encías no están acostumbradas a una limpieza tan eficiente. Se recomienda usar el modo  del cepillo eléctrico. Este síntoma normalmente desaparece a lo largo de 2 semanas. Si persiste tras este período, deje de usar el cepillo de dientes y consulte a su dentista.

* Advertencia

1. Los usuarios que usen ortodoncias, empastes o implantes dentales, deberían usar el producto bajo la guía de su dentista.
2. Mi Electric Toothbrush cumple con los estándares de seguridad para aparatos electromagnéticos. En caso de duda relacionada con marcapasos u otros implantes, consulte con su médico o fabricantes de los aparatos implantados antes del uso.
3. Este producto está diseñado únicamente para limpieza dental, encías y lenguas. No lo use para ningún otro propósito. Si siente incomodidad o dolor, pare inmediatamente de usar el producto y consulte a un médico.

* Prohibiciones

1. No sumerja el pie de carga en agua o cualquier otro líquido.
2. Tras su limpieza, compruebe que el conector de la base de carga está completamente seco antes de conectarlo.
3. Este producto contiene baterías recargables integradas. No lance el producto al fuego, ni lo cargue, use o coloque en un entorno de alta temperatura.
4. No intente modificar, desmontar o reparar el producto.

* Importante

1. Antes de usarlo, compruebe que el producto no tiene un daño evidente. Si está dañado o roto, no lo use.
2. Antes de conectarlo a una fuente de corriente, compruebe que el suministro local es consistente con el voltaje requerido marcado en el producto.
3. Si hay cualquier daño en la base de carga, no lo use.
4. Si este producto (incluyendo el mango y/o el cabezal) muestra cualquier signo de rotura, deje de usarlo.
5. No use la base de carga en un entorno de alta temperatura (Por ejemplo: Expuesto al sol).
6. No use el cepillo de dientes mientras se baña o duche.

* Consejos


1. No comparta el cabezal de su cepillo de dientes con otros.
2. No enrolle el cable de corriente alrededor de la base de carga cuando esté conectada a una fuente de corriente.
3. No coloque objetos de metal en la base de carga cuando esté conectada a una fuente de corriente.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protector
del eje rotor



Mango del
cepillo de dientes

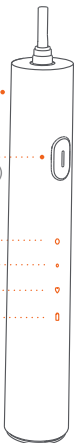

Botón On/Off
(On/Off/Cambiar de modos)

Modos

- Estándar
- Suave
- Favorito

Indicador de
Energía/Bluetooth



Cabezal



Cubierta
protectora
del cabezal

Manual
de usuario

Anillo de color
(para diferenciación)



Base de
carga




MI Electric Toothbrush
Manual de Usuario




2. INSTRUCCIONES DE USO

Consejo:

Puede que experimente picor o un ligero sangrado tras el primer uso. Esto se debe a que las encías no e están acostumbradas a una limpieza tan eficiente. Se recomienda usar el modo  favorito del cepillo e ir cambiando hacia los otros modos después de un periodo de tiempo de forma que pueda transitar de un cepillado manual a un cepillado eléctrico. Este síntoma normalmente desaparece a lo largo de 1-2 semanas. Si persistiera tras 2 semanas, deje de usar el cepillo y consulte a su dentista.


a. Colocar un cabezal

Fije el cabezal del cepillo de dientes al mango, y asegúrese de que queda una pequeña separación entre ellos. (Esta separación es para garantizar que el cabezal no choca con el mango durante la vibración de alta frecuencia, de modo que el motor pueda ejercer una mayor fuerza.)

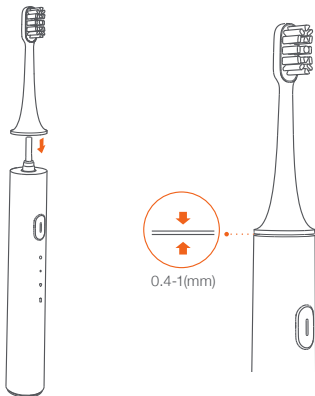


b. Colocar o reemplazar un aro de color

- Reemplace el anillo con un color diferente de su elección.
- Retirar un anillo de color: Sujete el cepillo con la mano izquierda, presione sobre la parte trasera del cepillo con el pulgar izquierdo, presione sobre el hueco de aire al fondo con el dedo índice de la mano derecha, inserte la uña en el pequeño hueco entre el anillo y el mango y empuje el anillo de color hacia arriba con un poco de fuerza para retirarlo.
- Colocar un anillo de color: coloque el anillo de color con los huecos de encaje hacia abajo y alinéelo con las tres marcas del mango. Presione el anillo hacia abajo para colocarlo.

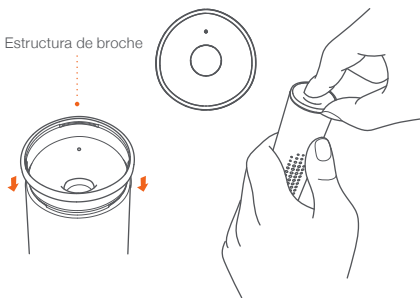


c. Colocar la pasta de dientes

Moje el cabezal del cepillo y coloque la cantidad apropiada de pasta de dientes en el cabezal.

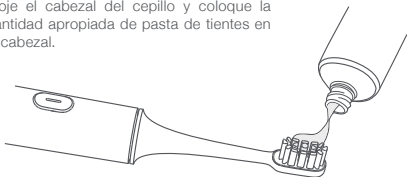



d. Seleccionar un modo



- On/Off/Cambiar de modo
- Encendido: presione brevemente el botón para encender el cepillo.
- Cambiar de modos: con el cepillo encendido, presione para cambiar entre los modos.
- Pausa: presione el botón durante un segundo para pausar el cepillo. El cepillo se apagará automáticamente si no se realiza ninguna acción pasados 30 segundos.
- Apagado: Cuando el cepillo está encendido, cambie hasta el modo favorito  y después cambie de modo para apagarlo.
- In case of special circumstances, press and hold the button for 12 seconds to restore factory settings (to prevent data errors, synchronize data on the smartphone via Bluetooth).


e. Cepillado saludable de los dientes

- Mueva el cepillo lentamente manteniendo un ángulo de 45° entre las cerdas del cepillo y las líneas de la encía.
- Puede pulsar el botón de On/Off durante el cepillado para cambiar libremente entre los modos de cepillado.
- Durante el cepillado, el cepillo detiene la vibración cada 30 segundos para indicarle que cambie la posición de cepillado.
- Si el cepillo no se pausa activamente, se apaga automáticamente cuando el cepillado termina (el modo de cepillado puede configurarse en la App).

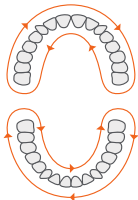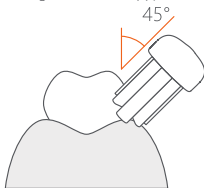


f. Limpieza del cabezal

- Tras el cepillado, enjuague el cabezal con un chorro de agua.
- Tras el limpiado, cubra el cabezal con la funda protectora para mantener el cabezal limpio e higiénico.

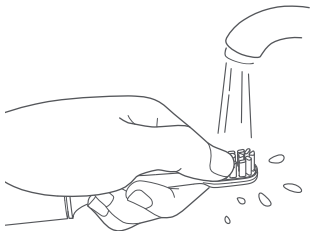

Test de seguridad FDA

- Los copolímeros de acrilonitrilo y las resinas han sido testeadas bajo el cumplimiento de los estándares U.S.F.D.A C.F.R.21. Parte 180.22 y 181.32; las resinas de Nylon se han testado bajo el cumplimiento de los estándares U.S.F.D.A C.F.R.21 Parte 177.1500.

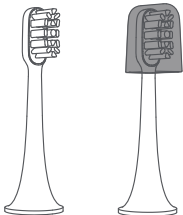

* Se recomienda reemplazar el cabezal del cepillo de dientes cada 3 meses.

9. Cargue el cepillo periódicamente


- Cuando se conecta la base de carga a la corriente, el indicador de energía del cepillo muestra diferentes estados:

100%: azul-verde fijo

60%-20%: naranja parpadeante

100%-60%: azul-verde parpadeante <20%: rojo parpadeante

- Cargar el cepillo por completo cuando la batería es baja lleva más de 12 horas (el indicador de energía parpadea en rojo).
- Si se realiza con éxito la conexión Bluetooth durante la carga, el indicador de energía/Bluetooth parpadeará tres veces y la conexión Bluetooth se mantendrá. Una vez se desactive la conexión Bluetooth, el indicador de carga vuelve a la normalidad.

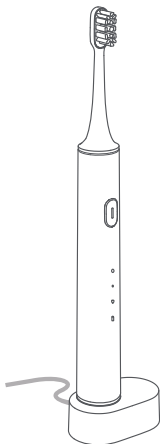

- Bluetooth conectado: azul
- 100%: azul-verde fijo
- 100%-60%: azul-verde parpadeante
- 60%-20%: naranja parpadeante
- 20%-0%: rojo parpadeante

DESCARGAR LA APP MI HOME

a. Configuración Rápida

Controle su dispositivo e interactúe con otros dispositivos smart home en la app Mi Home.

1. Descargue e instale la app Mi Home.

Escanee el código QR o vaya a la App Store / Play Store para descargar e instalar la app Mi Home.



2. Añadir un dispositivo

Abra "Mis dispositivos" in la app Mi Home, seleccione + en la esquina superior derecha, y siga las instrucciones.

b. Enlazar el Dispositivo

1. Active la función Bluetooth en su smartphone
Acerce el cepillo de dientes a su smartphone.
2. Realice los pasos necesarios en la app Mi Home para enlazar el dispositivo. Añada un dispositivo en "Mis dispositivos".
3. Seleccione un dispositivo.
Toque en "Escanear".
Elija "Mi Electric Toothbrush".
4. Presione los botones que se le soliciten y presione el botón On/Off en el cepillo de dientes durante 3 segundos para confirmar el enlace.

* El cepillo de dientes no funcionará cuando se está enlazando con el Bluetooth. El enlace Bluetooth no se puede realizar con el cepillo funcionando (motor girando).

c. Sincronización de Datos

Descarga la app Mi Home, registre una cuenta Mi, y acceda a la cuenta. Acceda a "Mis dispositivos" y toque en el dispositivo de la lista de dispositivos.



Acerque el cepillo al smartphone



Deslice hacia abajo para sincronizar los datos



La sincronización de datos se ha completado.

d. Vista de Informe y Configuración de Funciones

- Cambie al modo favorito  .
- Se muestran datos de cepillado e informes de análisis.
- Compruebe los días de uso restantes del cabezal.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Las baterías de litio dentro del producto pueden contener sustancias contaminantes. Antes de deshechar el producto o introducirlo en el depósito de deshecho designado por el gobierno, asegúrese de retirar las baterías y enviarlas al depósito de baterías designado para ello. Si no es capaz de extraer las baterías, puede enviar el producto al Centro de Servicio Post-Venta Mi. El personal del Servicio Post-Venta retirará las baterías y las deshechará con seguridad medioambiental.

ESPECIFICACIONES

Mango del cepillo

Nombre: Mi Electric Toothbrush

Modelo: DDYS01SKS

Voltaje nominal: 3.7V \approx 0.55A

Potencia nominal: 2W

Tiempo carga: aprox. 12 hours

Calificación IP : IPX7

Base de carga

Modo de carga: carga inductiva

Tipo: base de carga de cierre seguro

Calificación IP: IPX7

Entrada: 5 V \approx 0.5 A

Made in China

Solución de Problemas

Problema	Causas
El dispositivo no enciende.	El cepillo se está cargando; El cepillo está conectado al Bluetooth; El nivel de batería es bajo.
El cabezal no encaja en el rotor del mango.	Hay pequeños objetos en el orificio del cabezal obstruyéndolo; La pasta de dientes u otras sustancias se han pegado al rotor; El cabezal del cepillo no es un cabezal auténtico Mi.
El consumo de energía es rápido y el dispositivo necesita cargarse con frecuencia.	El dispositivo se encuentra en el estado de conexión por Bluetooth durante mucho tiempo; El dispositivo se usa con demasiada frecuencia.
La vibración en el cabezal es débil.	El cabezal no está insertado correctamente; Hay pequeños objetos en el orificio del cabezal impidiendo la buena conexión con el rotor del mango.
La app no puede conectar con el cepillo de dientes.	El Bluetooth del smartphone está apagado; El cepillo no se encuentra cerca del smartphone; El cepillo se encuentra en estado de vibración.

Lea este manual cuidadosamente antes de uso, y consérvelo para futura referencia.

Principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricante: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Dirección: Unit 2018, RuiFeng Enterprise Center, Gui Miao Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong

Para más información, por favor acceda a www.mi.com/es



Mi Electric Toothbrush

Contenido del embalaje: mango del cepillo de dientes, cubierta protectora del eje del motor, anillas de color, base de carga, cabezal del cepillo de dientes, cubierta protectora del cabezal del cepillo de dientes, manual del usuario

Modelo: DDYS01SKS

Voltaje nominal: 3,7 V --- 0,55 A

Potencia nominal: 2 W

Entrada: 5 V --- 0,5 A

Normativas: GB 4706.1-2005, GB 4706.59-2008,
Q/SKS 001-2017

Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Soocas (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (una empresa del ecosistema Mi)

Dirección: Room 2018, Bloque B, Piso 2, Ruifeng Business Center,
No. 22 Guimiao Road, Distrito Nanshan, Shenzhen, China

Para obtener información adicional, visite www.mi.com

Fabricado en China

Fecha de producción: 2017, 08

Certificación
de calidad

