

Mi Electric Toothbrush

Manuale utente



PRECAUZIONI

⚠ Nota

Durante il primo utilizzo è possibile percepire una sensazione di prurito o riscontrare tracce di sangue, in quanto le gengive non sono abituate a una pulizia così accurata. Si consiglia di utilizzare la modalità di pulizia preferita. Questi sintomi in genere scompaiono entro 1 o 2 settimane. Se persistono oltre le 2 settimane, interrompere l'uso di questo spazzolino e consultare un dentista.

* Attenzione

1. Gli utenti che hanno subito interventi ortodontici, riparazioni dentarie o con impianti devono utilizzare il prodotto sotto la guida del proprio dentista.
2. Mi Electric Toothbrush rispetta gli standard di sicurezza previsti per i dispositivi elettromagnetici. Per eventuali dubbi in merito all'uso da parte di soggetti portatori di pacemaker o di altri dispositivi, rivolgersi al proprio medico o al produttore degli impianti, prima dell'uso.
3. Questo prodotto è stato concepito unicamente per la pulizia di denti, gengive e lingua. Non utilizzarlo per altri scopi. Se si prova fastidio o dolore durante la pulizia, interrompere immediatamente l'uso de prodotto e consultare un medico.

* Divieti

1. Non immergere il dock di ricarica in acqua o in altri liquidi.
2. Dopo la pulizia, verificare che la spina elettrica del dock di ricarica sia perfettamente asciutta, quindi collegarla a una presa di alimentazione.
3. Questo prodotto contiene batterie ricaricabili integrate. Non gettarlo nel fuoco o ricaricarlo, utilizzarlo o riporlo in ambienti con temperature elevate.
4. Non cercare di modificare, smontare o riparare il prodotto.


* Importante

1. Verificare la presenza di danni visibili sul prodotto prima di utilizzarlo. Se presenta rotture o gravi danni, non utilizzarlo.
2. Prima di collegarlo a una presa di alimentazione, verificare che l'alimentazione di rete del paese in cui ci si trova sia compatibile con la tensione necessaria indicata sul prodotto.
3. Non utilizzare il dock di ricarica se presenta danni.
4. Interrompere l'uso se il prodotto (manico e testa dello spazzolino inclusi) presenta segni di rottura.
5. Non utilizzare il dock di ricarica in ambienti con temperature elevate (esposti al sole).
6. Non utilizzare lo spazzolino durante il bagno o la doccia.

* Consigli

1. Non condividere con altri il proprio spazzolino.
2. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al dock di ricarica quando collegato all'alimentazione.
3. Non posizionare oggetti metallici sul dock di ricarica quando collegato all'alimentazione.

1. PANORAMICA DEL PRODOTTO

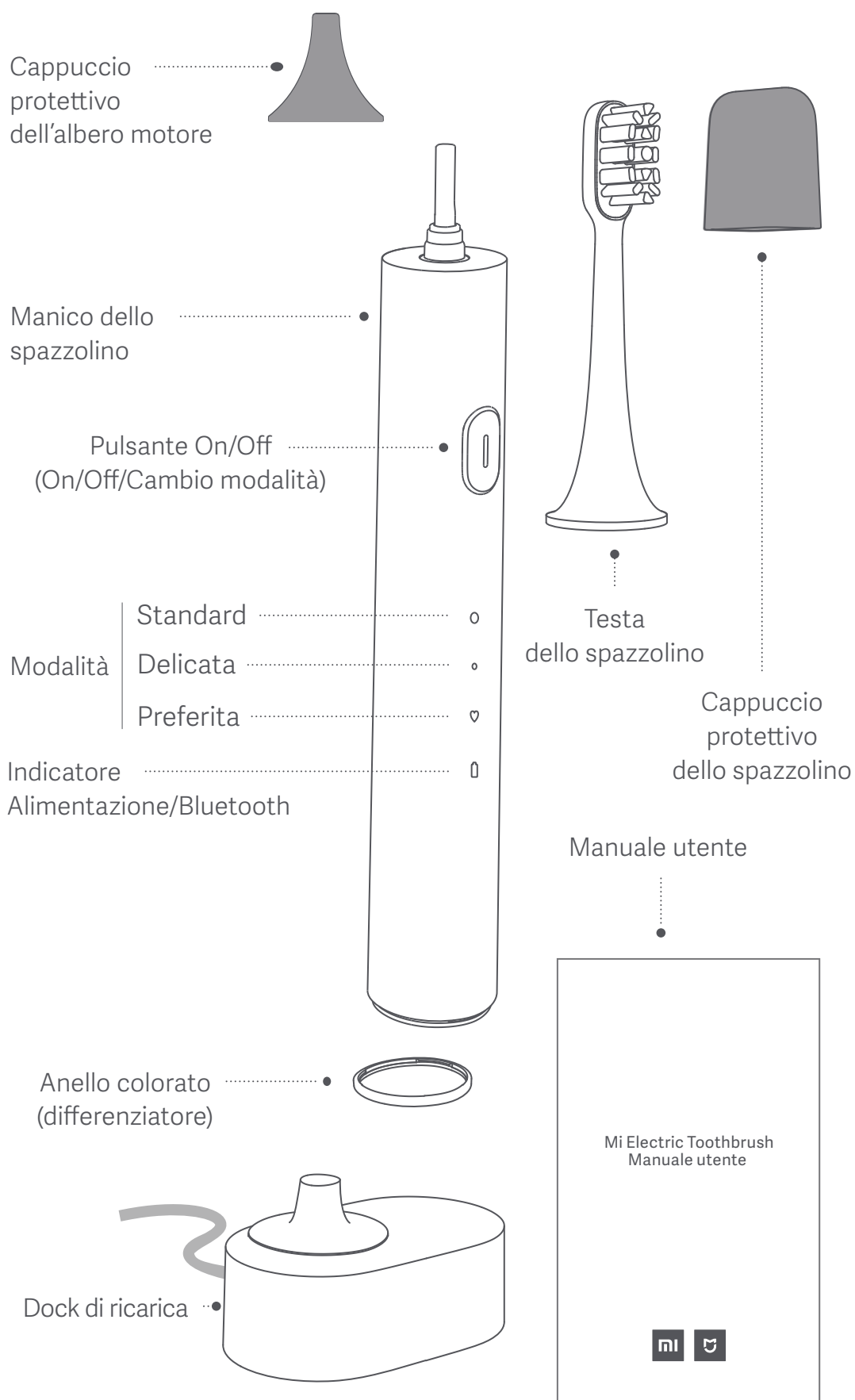


2. MODALITÀ D'USO

Consiglio:

Durante il primo utilizzo è possibile percepire una sensazione di prurito o riscontrare tracce di sangue, in quanto le gengive non sono abituate a una pulizia così accurata. Si consiglia di utilizzare la modalità dello spazzolino preferita e di passare ad altre modalità dopo un po' di tempo, in modo da effettuare un passaggio graduale dallo spazzolino manuale a quello elettrico. Questi sintomi in genere scompaiono entro 1 o 2 settimane. Se persistono oltre le 2 settimane, interrompere l'uso di questo spazzolino e consultare un dentista.

a. Installare la testa dello spazzolino


Installare la testa sul manico dello spazzolino e accertarsi di lasciare un po' di spazio tra le due parti (ciò fa sì che la testa non colpisca il manico dello spazzolino durante la vibrazione ad alta frequenza, per evitare un'eccessiva potenza del motore)

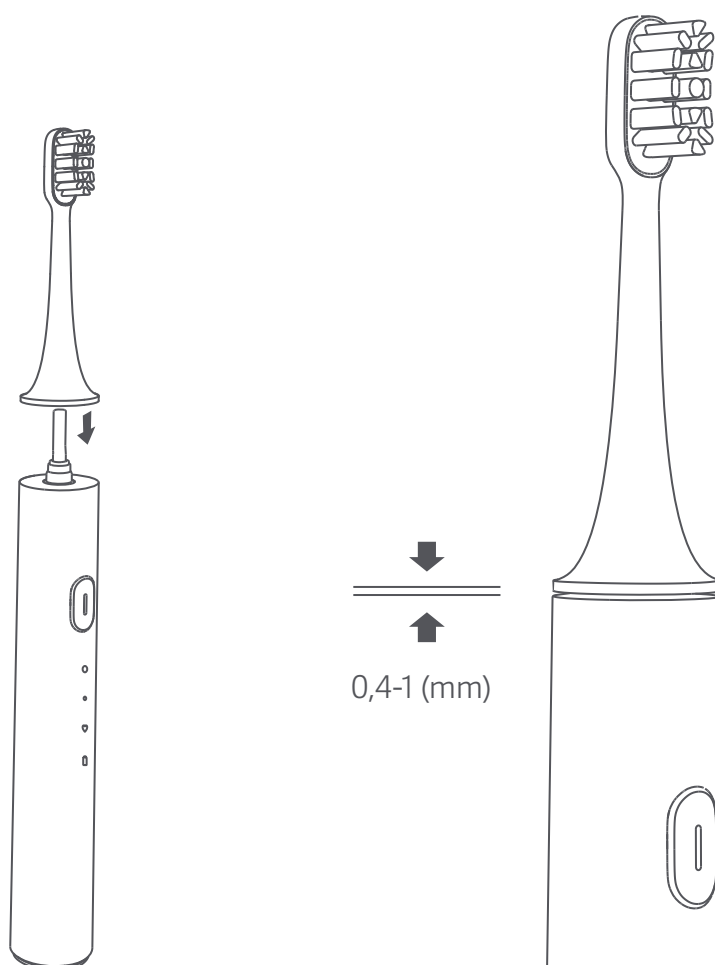

b. Installare e sostituire un anello colorato.


- È possibile installare l'anello del proprio colore preferito.
- Rimuovere un anello colorato: Afferrare lo spazzolino con la mano sinistra, premere sul retro dello spazzolino (zona in rilievo) con il pollice della stessa mano, premere sul foro dell'aria sul fondo con l'indice della mano destra, inserire l'unghia del pollice nello spazio tra l'anello colorato e il manico, quindi spingere l'anello verso l'alto esercitando appena un po' di forza per rimuoverlo.
- Installare un anello colorato: Mantenere gli agganci dell'anello verso il basso in modo che corrispondano alle tre posizioni di aggancio sul manico, in questo modo le due forme triangolari corrispondono se viste dall'alto. Premere l'anello colorato verso il basso, esercitando una forza sufficiente a installarlo.

Agganci

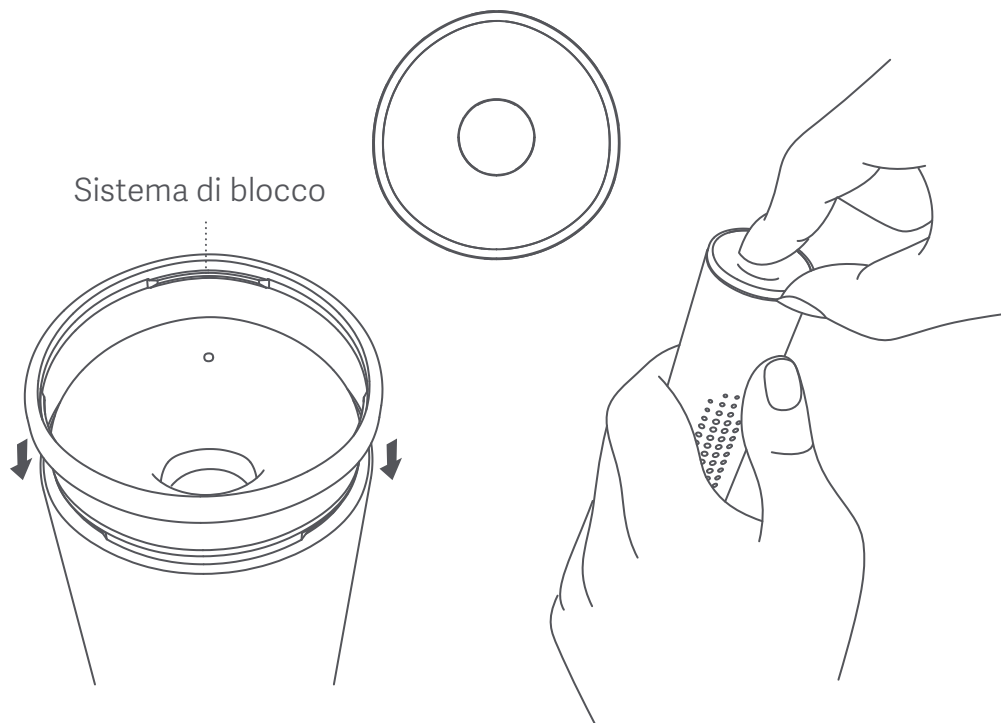


c. Applicare il dentifricio

Bagnare la testa dello spazzolino e applicare la quantità corretta di dentifricio.

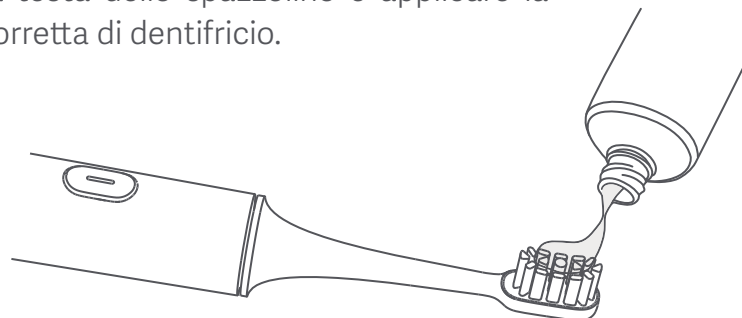

d. Selezionare una modalità

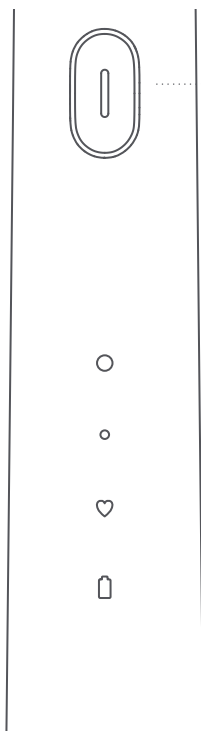


- On/Off/Cambio modalità
- Accensione: premere brevemente il pulsante per accendere l'unità.
- Passare da una modalità all'altra: quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante per cambiare modalità.
Pausa: premere il pulsante per 1 secondo per mettere in pausa il dispositivo. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inutilizzo, quando si trova in pausa.
- Spegnimento: Quando il dispositivo è acceso, attivare la modalità preferita, quindi modificarla nuovamente per spegnerlo.

In particolari circostanze, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo tenendo premuto il pulsante per 12 secondi (al fine di prevenire errori nei dati, sincronizzarli con lo smartphone via Bluetooth).



e. Corretto lavaggio dei denti

- Muovere delicatamente lo spazzolino, mantenendo un angolo di 45° tra le setole e la linea delle gengive.
- È possibile premere il pulsante On/Off durante il lavaggio per cambiare liberamente la modalità di spazzolamento.
- Durante il lavaggio, ogni 30 secondi lo spazzolino arresta brevemente la vibrazione per spingere l'utente a cambiare la posizione di spazzolamento.
- Se lo spazzolino non viene messo in pausa dall'utente, si spegne automaticamente al termine della modalità di spazzolamento (che può essere impostata tramite l'app).

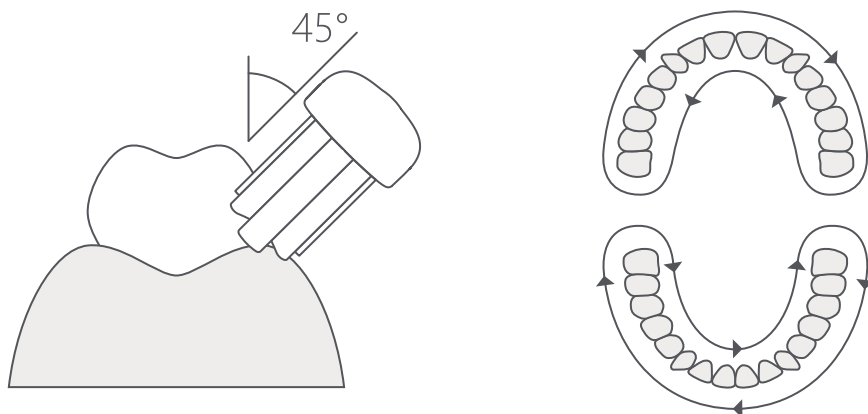

F. Pulire la testina dello spazzolino.

- Dopo averla utilizzata, sciacquare la testa dello spazzolino sotto l'acqua corrente.
- Dopo la pulizia, inserire sulla testa dello spazzolino l'apposito cappuccio per mantenere la testa pulita e preservarne l'igiene.

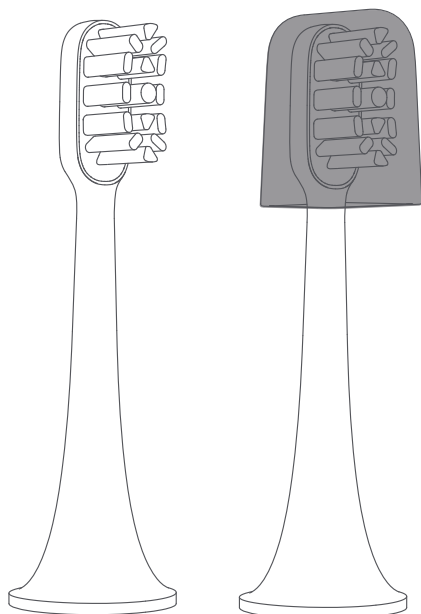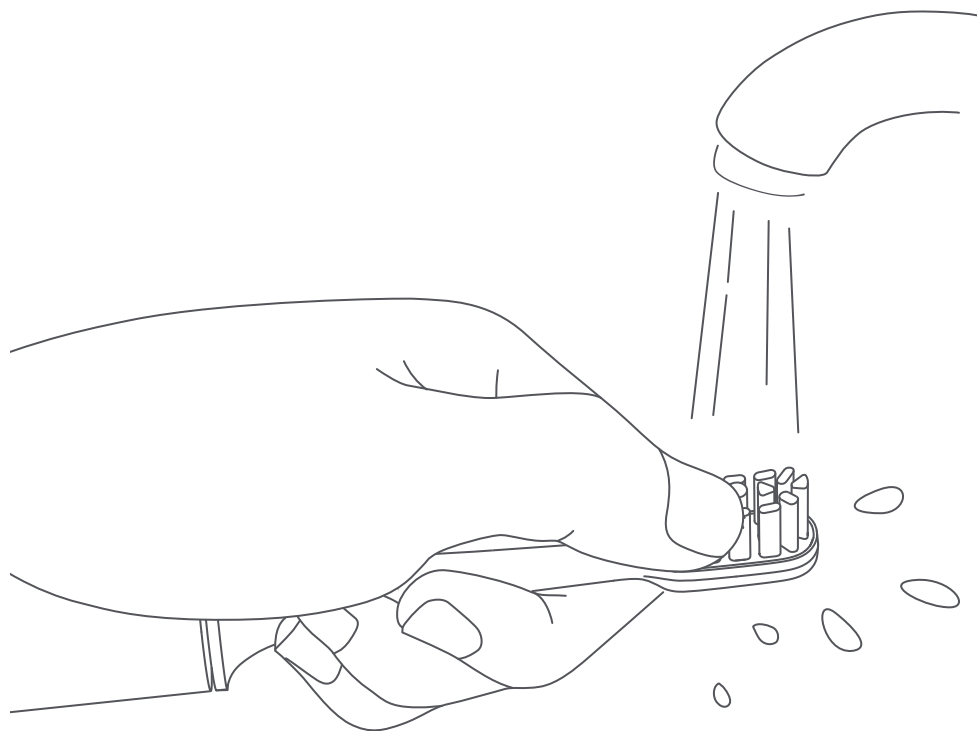

* I dentisti consigliano di sostituire la testa dello spazzolino ogni tre mesi.

G. RICARICARE PERIODICAMENTE LO SPAZZOLINO.


- Dopo aver collegato la bassetta di ricarica alla presa elettrica, l'indicatore di alimentazione dello spazzolino presenta diversi effetti colore:

100%: verde-azzurro fisso

60%-20%: arancione lampeggiante

100%-60%: verde-azzurro lampeggiante <20%: rosso lampeggiante

- Quando la batteria è scarica, la ricarica completa del dispositivo richiede oltre 12 ore (l'indicatore della batteria lampeggia in rosso).
- Se la connessione Bluetooth è stata effettuata correttamente, l'indicatore di alimentazione/Bluetooth lampeggia tre volte e la connessione viene mantenuta. Una volta che la connessione Bluetooth viene interrotta, l'indicazione di ricarica viene ripristinata.

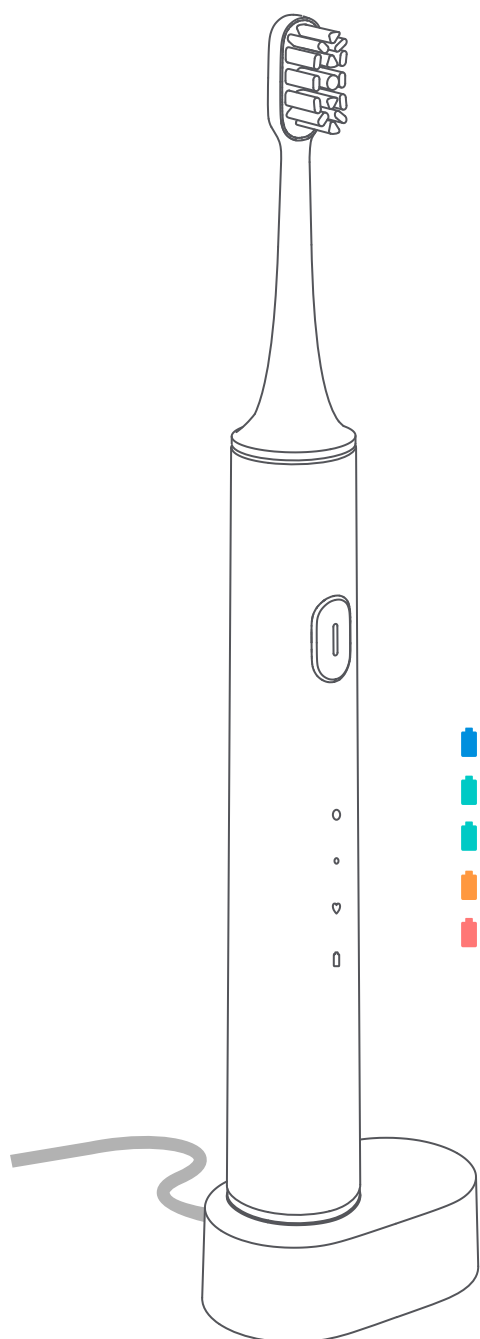

- Bluetooth connesso: blu
- 100%: verde-azzurro fisso
- 100%-60%: verde-azzurro lampeggiante
- 60%-20%: arancione lampeggiante
- 20%-0%: rosso lampeggiante

DOWNLOAD DELL'APP MI HOME

a. Configurazione rapida

L'app Mi Home permette di controllare e far interagire i dispositivi domotici Mi.

1. Scaricare e installare l'app Mi Home

Scansionare il QR code accedere ad App Store per scaricare l'app Mi Home.



2. Aggiungere un dispositivo.

Aprire "My devices" (dispositivi personali) nell'app Mi Home, selezionare "+" in alto a destra e seguire le indicazioni su schermo per aggiungere il dispositivo.

3. Acquistare altri prodotti.

Per acquistare altri prodotti smart e dispositivi di alta qualità, accedere all'app Mi Home.



b. Abbinamento del dispositivo

1. Abilitare il Bluetooth su proprio smartphone.

Avvicinare lo spazzolino allo smartphone.

2. Eseguire le operazioni richieste dall'app Mi Home per abbinare il dispositivo.

Aggiungere un dispositivo in "My devices" (Dispositivi personali).


3. Selezionare un dispositivo.

Toccare "Scan device" (Rileva dispositivi).

Selezionare "Mi Electric Toothbrush".


4. Premere i pulsanti come indicato e premere il pulsante On/Off dello spazzolino per 3 secondi, per confermare l'abbinamento.

* Lo spazzolino non può avviarsi quando connesso a uno smartphone via Bluetooth e lo spazzolino non può essere connesso a uno smartphone via Bluetooth quando sta vibrando.

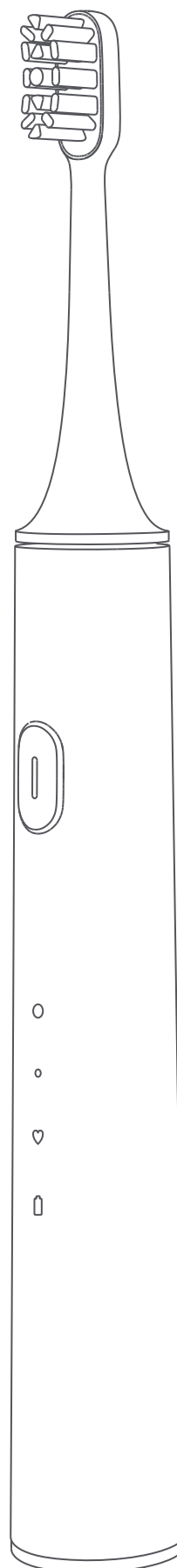


c. Sincronizzazione dati

Scaricare l'app Mi Home, creare un account Mi e accedere con questi dati. Accedere a "My devices" (Dispositivi personali) e selezionare il dispositivo nell'elenco.

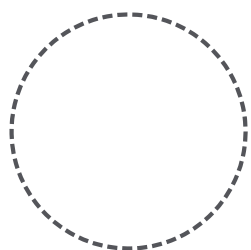

Avvicinare lo spazzolino allo smartphone.

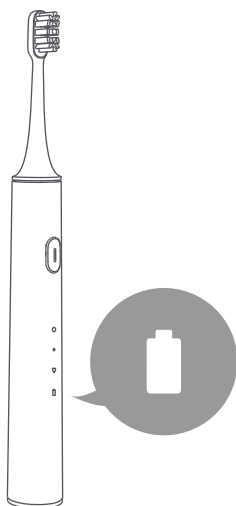


Far scorrere la pagina verso il basso per sincronizzare i dati.



Sincronizzazione dati completata.

d. Vista report e impostazione della funzione

- Passare alla  modalità preferita.
- Vengono visualizzati i dati relativi allo spazzolamento e i report delle analisi.
- È possibile visualizzare i restanti giorni utili della testa dello spazzolino installata.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Le batterie al litio ricaricabili all'interno del prodotto possono contenere sostanze inquinanti. Prima di smaltire il prodotto o consegnarlo alla struttura di riciclaggio prevista dalle normative, accertarsi di rimuovere le batterie e conferirle a un centro di smaltimento idoneo. Se non è possibile rimuoverle, il dispositivo può essere inviato al servizio post-vendita di Mi. Il personale addetto si occuperà di rimuovere le batterie e di smaltirle in maniera ecologica.

SPECIFICHE TECNICHE

Manico dello spazzolino

Nome: Mi Electric Toothbrush

Modello: DDYS01SKS

Tensione nominale: 3,7 V

Potenza nominale: 2 W

Tempo di ricarica: oltre 12 ore

Classificazione IP: IPX7

Prodotto in Cina

Dock di ricarica

Modalità di ricarica: a induzione

Tipo: dock di ricarica

completamente chiuso

classificazione IP: IPX7

Ingresso: 5 V \equiv 0,5 A

Risoluzione dei problemi

Guasto	Cause possibili
Impossibile accendere il dispositivo.	Il dispositivo si sta ricaricando; Il dispositivo è connesso via Bluetooth; La batteria è scarica.
Impossibile installare lo spazzolino sull'albero motore	Nel foro dello spazzolino sono presenti oggetti estranei; Sull'albero motore è presente del dentifricio o altre sostanze; La testa dello spazzolino non è un ricambio originale Mi Toothbrush.
Lo spazzolino si scarica velocemente ed è necessario ricaricarlo di frequente.	Il dispositivo si trova connesso via Bluetooth da molto tempo; Il dispositivo viene utilizzato molto spesso.
La vibrazione dello spazzolino risulta debole.	La testa dello spazzolino non è correttamente installata; Tra la testa e il manico dello spazzolino si trovano parti estranee
L'app non riesce a connettersi allo spazzolino.	Bluetooth del dispositivo disabilitato; lo spazzolino si trova lontano dal dispositivo portatile; Lo spazzolino si trova in stato vibrazione.

Elenco dei malfunzionamenti del prodotto

	Malfunzionamenti
Mi Electric Toothbrush	1. Impossibile accendere e spegnere normalmente il dispositivo.
	2. Vibrazione anomala della testa dello spazzolino.
	3. Impossibile connettere il dispositivo via Bluetooth.
	4. Ricarica anomala.
	5. Indicatore spento.

La garanzia non garantisce la copertura quando:

1. Il prodotto è stato riparato senza autorizzazione, utilizzato in modo improprio, per scopi non idonei, ha subito colpi, incidenti, modifiche, infiltrazioni di trassegni e le etichette anti contraffazioni sono state rimosse o manomesse.
2. è scaduto il periodo di validità del servizio "garanzia di riparazione, sostituzione e rimborso" associato al prodotto.
3. Il prodotto viene danneggiato per cause di forza maggiore.
4. Il malfunzionamento del prodotto non è riportato nell'elenco "Possibili malfunzionamenti del prodotto".
5. Il prodotto e i suoi accessori presentano i problemi di funzionamento riportati nell'elenco "Possibili malfunzionamenti del prodotto" a causa dell'intervento umano.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 400-788-4008.

Produttore SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Indirizzo: Unità 2018, RuiFeng Enterprise Center, Gui Miao Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen, Guangdong